



COME ESEGUIRE LO SCOTCH TEST / TEST DI GRAHAM

AVVERTENZE:

L'esame deve essere eseguito al **mattino** (il prima possibile prima di lavarsi o defecare) al fine di catturare le uova e/o le larve, facendole aderire alla superficie adesiva dello scotch.

Per reperire il materiale richiesto per la raccolta (vetrini e bastoncino di legno) è possibile recarsi presso una delle nostre sedi.

Si raccomanda, inoltre, di munirsi di **nastro adesivo trasparente** (scotch) da far aderire al vetrino.

E' importante non utilizzare nastri adesivi opachi, colorati o satinati.


La sera prima dell'esame, **evitare l'applicazione di creme o talco** nella zona perianale.

Le uova degli ossiuri sono appiccicose e altamente infettive, pertanto è necessario **indossare guanti protettivi** durante tutte le fasi della raccolta del campione.


PROCEDIMENTO:

1 Tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente poco più corto del vetrino (circa 5-6 cm)


2 Piegare delicatamente il nastro adesivo intorno all'estremità del bastoncino, assicurandosi che la parte adesiva sia rivolta verso l'esterno

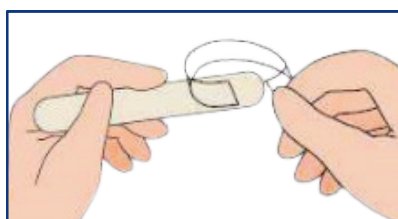

- 3** Tendendo il bastoncino con la mano destra, posizionare il nastro adesivo sulla superficie perianale, esercitando una leggera pressione per circa 15-20 secondi per raccogliere eventuali uova.

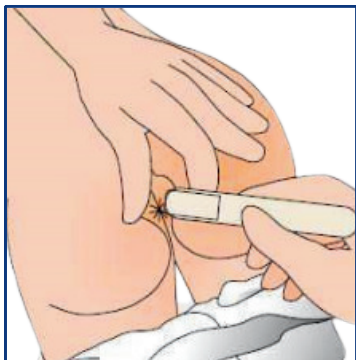

- 4** Dopo aver completato la raccolta, staccare delicatamente il nastro dal bastoncino e fissarlo sul vetrino, evitando la formazione di bolle d'aria.

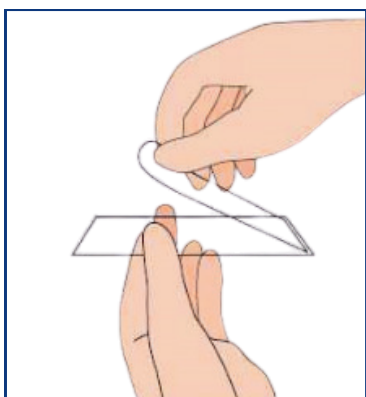

NO



NO



NO



SI



- 5** Strofinare delicatamente il nastro adesivo utilizzando un batuffolo di cotone per farlo aderire completamente alla superficie del vetrino.

N.B

Non sono idonei campioni con nastro adesivo imbrattato o con bolle d'aria tra il nastro e il vetrino.

La ricerca deve essere effettuata su almeno **3** vetrini.

Conservare i campioni raccolti in frigorifero e consegnarli rapidamente al laboratorio per evitare il deterioramento.